

快王
massage
chair

プロの技を
体感する。





人の手のような「もみ&たたき」、 そして体を支える背骨をしっかりとローリングできる機能を搭載

肩トップ位置調整機能によって背中中の「たたき&もみ」を始めるトップポイントの位置を3段階で調整できる機能を設定してあります。これにより体格差や集中したい「もみ&たたき」ポイントの調整も可能になりました。さらにローリング機能により、人間の体を支える大切な背骨をしっかりとローリングすることができます。また、3段階でもみ玉の幅調整も可能になり、どんな体型の方も背中全体をしっかりとマッサージできます。



◆もみ機能

4つのもみ玉がコリのポイントをしっかり揉みほぐします。まるでプロのマッサージ師にもまれている様な心地良さです。



◆たたき機能


快王のもみ玉は人の手の感触に近づけるために、シリコンゴムを使用しています。このもみ玉が背中全体をリズムカルにプロ技でたたきほぐします。

4つ玉ならではのきめ細かい動きと多彩なもみ機能で全身をマッサージします。もみ玉には人間の手の感触に近づけるためにシリコンゴムを使用。



◆ローリング機能

マッサージ器の基本でもある大切な機能です。このローリングは体を支える背骨を健康に保つ機能で背骨をストレッチするために毎日お使いいただきたい機能です。

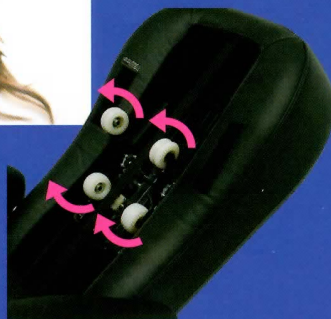

コンパクトボディに高機能


無駄を省き、洗練されたデザインでコンパクトでありながら、業務用として活用できる高スペックを搭載したマッサージチェア「快王」。プロの技で心地よい癒しの時間を演出してくれます。



お好みで無段階に調節できる 1WAYリクライニング機能を搭載

3段階調整エア機能の エアメカを搭載

足部エアーマッサージは、多重エア構造バルブにより圧力を満遍なく伝えることができます。この多重構造と絶妙な作動設定がプロ技のモミあげ感を再現します。さらに、座面エアーマッサージはお尻や脚の付け根の血行を促進するのに効果があります。

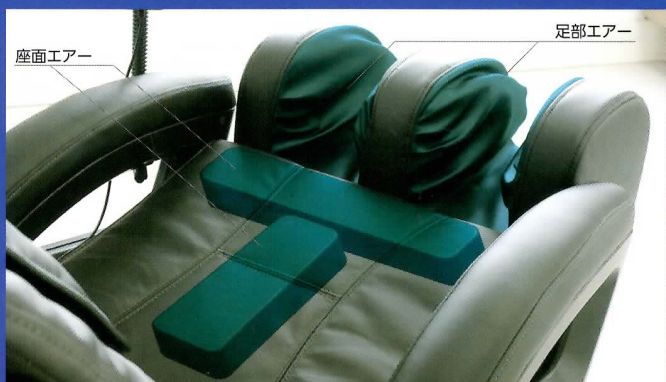

操作性を重視したリモコン

リモコンは視認性にこだわり使いやすさを追求しました。厳選された3つのコースから、その時の身体の調子に合わせてお選びいただけます。また、自分に合った微調整もお好み次第で出来ます。

リラクスクース

全身をやさしくマッサージするコース

疲労気味の身体をゆったりともみほぐします。首・肩・背中の疲労を、硬く張ってしまう前にやさしくケア。リラクスクース効果の高いコースです。

美脚コース

足とヒップ専用のエアーマッサージコース

下半身に溜まった疲れの回復は一筋縄ではいきません。美脚コースは足先からお尻まで、プロ技でもみあげるエアーマッサージコースです。

リフレッシュコース

全身疲労のためのハード動作中心のコース

硬くなった筋肉は、血液が動かなくなっている証拠です。だから、たたくなどの強い刺激で筋肉をゆるめてやるのが大切です。リフレッシュコースはこのようなハードな疲れに最適なコースです。



機能面でも耐久性でも業務用として使用可能なマシン

■消耗部品

傷みやすい箇所のメンテナンスを簡単に出来るように設計。



1. 枕カバー交換

この場所も長期で使用すると傷がつきやすく、汚れやすい場所です。業務用で使用した場合、衛生面では定期的に交換したい場所になります。これもワンタッチで簡単に交換することができます。

2. 背布交換

マッサージ機で一番摩擦の生じるところで長期で使用した場合、すり減って必ず交換が必要となる場所です。今まではこの交換に修理代など、かなりの費用が発生していましたが「快王」ではファスナーで誰でも簡単に交換可能となっています。

■コインタイマー「快王c」

コイン仕様もございます。



このコインタイマーは「快王」専用に開発した物で時間、金額も自由に設定が可能となっています。もちろん、カウンター付きですので入金額も確実に把握出来ます。またコイン仕様で稼働した場合はコインを入れたら自動でマッサージが開始し、終了したらリクライニングなど全て元の状態に復帰するようにプログラムされています。

●医療機器認証番号：224AKBZI00138A02
 (家庭用電気マッサージ機・管理医療機器)
 ●JANコードNO: 4969173328310



仕様

- 本体寸法(約)：幅 700mm×奥行 1360mm×高さ 1040mm
- 本体重量(約)：56kg
- 電源：AC 100V (50/60Hz) ●消費電力：85W
- 定格時間：15分
- 医療機器認可番号：224AGBZI00002A02 (家庭用電気マッサージ機・管理医療機器)
- JANコードNO: 4969173328310

メーカー希望小売価格 **オープン価格**

効能・効果 **あんま・マッサージの代用**：●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和




安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方はご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている方。(例)血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方 (例：急性炎症症状「けん(瘧) 怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期。衰弱しているとき。) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊椎骨折の方
- 捻挫、肉離れなどの炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方
- 背骨(脊髄)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方
- 医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内のみ有効です。

製造販売元 **株式会社 マルタカテクノ**
静岡県藤枝市八幡字広通 550-1

発売元  **株式会社 日本メディック**
神奈川県藤沢市下土棚 468-1
TEL 0466-45-3288 FAX 0466-45-1173

販売元  **株式会社 ビッグ・ツリー**
茨城県土浦市乙戸南 3-5-19
TEL 029-834-2588 FAX 029-841-4547

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 ●本パンフレットの記載内容は、平成25年6月現在のものです。